


CARL ZEISS
JENA

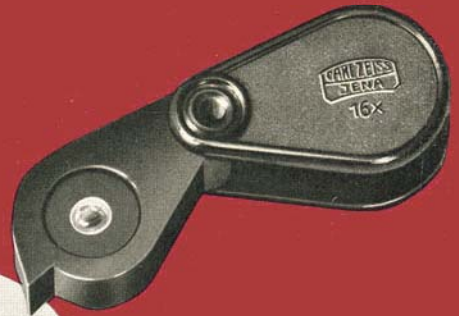

ZEISS

Anastigmatische Einschlaglupen

ZEISS

Anastigmatische Einschlaglupen

Für Arbeiten, die eine stärkere Vergrößerung als 10fach verlangen, reichen zweigliedrige aplanatische Systeme nicht mehr aus, man muß zu sogenannten anastigmatischen übergehen. Sie bestehen aus vier Linsen und geben bei den gewählten Vergrößerungen von 16-, 20-, und 25fach ein verhältnismäßig großes Sehfeld, das bis zum Rand eine gute Abbildung ohne farbige Säume und ohne Verzeichnung aufweist.

Der Beobachtungsabstand wird zwar bei wachsender Vergrößerung unvermeidlich kleiner, aber er genügt, um die Lupen mit Erfolg für botanische und zoologische Untersuchungen oder als Hiifslupen bei Mikroskopierarbeiten benutzen zu können.

Im Gehäuse aus Preßstoff sind die Lupen staubsicher aufbewahrt und können daher in jeder beliebigen Tasche mitgeführt werden.

Die Lupe ist mit der beschrifteten Seite des Gehäuses dem Auge zugekehrt anzuwenden.

Daten

Vergrößerung	Freier Linsendurchmesser mm	Sehfeld-durchmesser etwa mm	Freier Ding-abstand etwa mm
16×	5,0	11,0	10,0
20×	4,5	8,0	7,5
25×	3,5	6,0	6,0

Bestellliste

Benennung	Gewicht g	Bestellnummer	Bestellwort
Anastigmatische Einschlaglupe			
16×	15	60 60 50	<i>Vaond</i>
20×	15	60 60 51	<i>Vaooe</i>
25×	15	60 60 52	<i>Vaopf</i>

V E B C A R L Z E I S S J E N A

Abteilung für ophthalmologische Geräte

Drahtwort: Zeisswerk Jena

Fernsprecher 3541

Druckschriften-Nr. **CZ 60-415-1**

Waren-Nr. 37 12 43 00

TRPT-NR. 5844/53

MP 954 - A 300/54 V/10/1 2436